


HydroTac®/ HydroTac® Comfort

Hydroaktivt skumförband

HydroTac är ett hydroaktivt skumförband med två olika funktioner. Skumförbandet gör att överflödigt exsudat snabbt och effektivt absorberas upp samtidigt som den hydroaktiva kontaktytan återfuktar såret och ser till att förbandet bibehåller en optimal sårålmiljö. Förbandet används med fördel under granuleringsfasen. Förbandet är enkelt att hantera och kan avlägsnas smärtfritt. Kontaktytan är lätt "självhäftande" och fäster endast på huden, ej på såret.

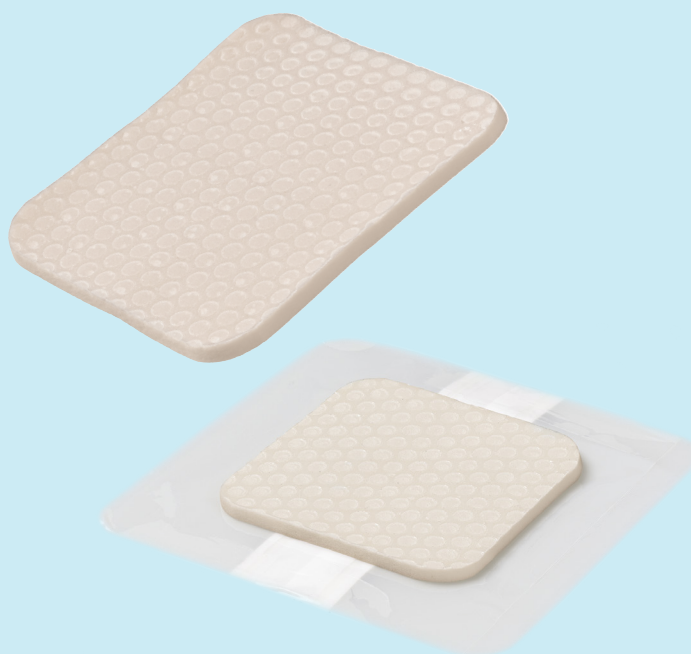

1 Hög absorptionskapacitet

2 Lätt adhesiv och enkel hantering

3 Återfuktande kontaktyta

Fördelar:

Hög absorptionskapacitet
Enkel och hygienisk hantering
Återfuktar kontaktytan
Avlägsnas smärtfritt
Lätt adhesiv



Egenskaper

HydroTac är genomsläpplig för luft, fukt och skyddar mot bakterier. Den hydroaktiva kontaktytan har en nätstruktur vilket gör det möjligt att både absorbera upp exsudat och samtidigt bibehålla en fuktig sårmiljö. Den hydroaktiva gelen motverkar att förbandet fastnar i såret och kan tas bort utan att patienten upplever smärta. HydroTac komfort har en häftkant vilket gör att inga andra förband är nödvändiga.

Material

Förbandet består av polyuretan och kontaktytan är impregnerad med en hydrogel som består av en blandning polyuretanpolymer som innehåller propylene glycol. HydroTac komfort har en akrylatbaserad häftmassa som är lågallergen. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Indikation

För behandling av lätt till måttligt vätskande sår, såsom bensår, diabetesfotsår och trycksår.
Kontraindikationer: Inga kända.

Sortiment	Mått	Sårdyna	Art.nr.	Afp	Tfp
HydroTac® Steril, enstycksförpackad	6 cm rund		685 848	3 st	12 Afp
	6 cm rund		685 849	10 st	4 Afp
	10 x 10 cm		685 831	3 st	12 Afp
	10 x 10 cm		685 832	10 st	4 Afp
	15 x 15 cm		685 839	3 st	12 Afp
	10 x 20 cm		685 833	3 st	12 Afp
	15 x 20 cm		685 843	10 st	4 Afp
	20 x 20 cm		685 844	3 st	6 Afp
HydroTac® komfort Steril, enstycksförpackad	8 x 8 cm	3,5 x 3,5cm	685 810	10 st	6 Afp
	12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	685 815	10 st	6 Afp
	15 x 20 cm	9 x 14 cm	685 821	10 st	6 Afp
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	685 817	3 st	12 Afp
	20 x 20 cm	14 x 14 cm	685 822	3 st	12 Afp
HydroTac® sacral Steril, enstycksförpackad	22 x 22 cm	16 x 13,6 cm	685 828	3 st	6 Afp