


Omnifix[®] elastic

Fixeringshäfta av non-woven

Fixeringshäftan Omnifix elastic är en väv som hjälper till att fixera förband över stora områden. Vävens skyddspapper har ett rutnmönster som gör att det är lätt att mäta hur stor bit som behövs och sedan klippa efter linjeringen. Väven kan både ge och förhindra möjlighet till rörelse. Anledningen är att väven är endast elastisk på ena hållet.

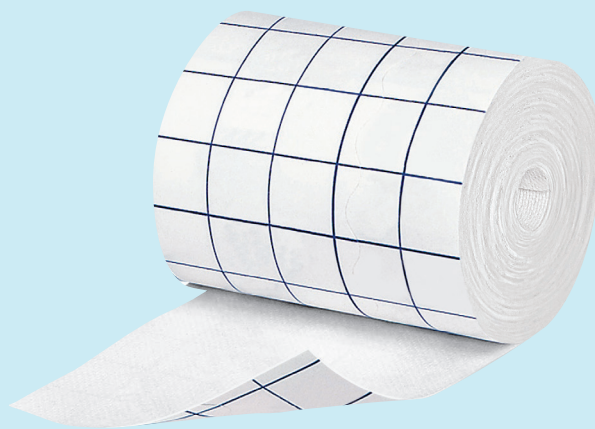

- 1 För fixering över större områden
- 2 Klippas till önskad storlek
- 3 Säker fixering
- 4 Enkel hantering
- 5 Behöver inte avlägsnas vid röntgen
- 6 Fri från kolofonium och latex

Fördelar:

För fixering över större områden
Klipps till önskad storlek
Säker fixering
Enkel hantering
Behöver ej avlägsnas vid röntgen
Fri från kolofonium och latex



Egenskaper

Omnifix elastic är genomsläpplig för luft och fukt vilket innebär att den är mycket hudvänlig och förhindrar maceration av huden. Väven fäster säkert men kan ändå tas bort utan smärta och lämnar heller inga klisterrester kvar på huden. Omnifix elastic absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar. Omnifix elastic är tvärelastisk och smidig att fixera över exempelvis leder utan att veck bildas. Väven är stum på längden, därför är det viktigt att fixera den på rätt håll. På ena hållet ger den bra rörlighet, men om väven vänds kan rörelse istället förhindras. Detta ger möjlighet till stadga vid behov. Skyddspappret på baksidan har ett vågformat stanssnitt som gör att det är lätt att avlägsna.

Material

100% polyesterväv med hypoallergen häftmassa baserad på syntetiskt gummi, fri från kolofonium och latex.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Som förbandsskydd och fixering över stora ytor inom alla medicinska områden. Fixering runt leder, koniska och runda kroppsdelar. Fixering av mätinstrument, sonder, katetrar och dylikt.

Fixeringsinstruktion

Huden måste vara torr vid fixering av fixeringsväven.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Omnifix® elastic	2 m x 10 cm	900 601	1 st	64 Afp
Osteril på rulle i ask	10 m x 2,5 cm	900 606	2 st	63 Afp
	10 m x 5 cm	900 602	1 st	63 Afp
	10 m x 10 cm	900 603	1 st	36 Afp
	10 m x 15 cm	900 604	1 st	24 Afp
	10 m x 20 cm	900 605	1 st	18 Afp
	10 m x 30 cm	900 607	1 st	12 Afp